

しきゅうちつぶかんし
子宮腔部鉗子

Portio Vaginalis Uteri Forceps

子宮頸部を固定し、把持や牽引を行うために用いられる鉗子。

つかはらちつぶかんし

塚原腔部鉗子 ネジ止

Tsukahara Uterine Forceps



ちつぶわんきょくかんし

腔部弯曲鉗子

4 × 5爪

BOX-LOCK

Uterine Forceps with Curve

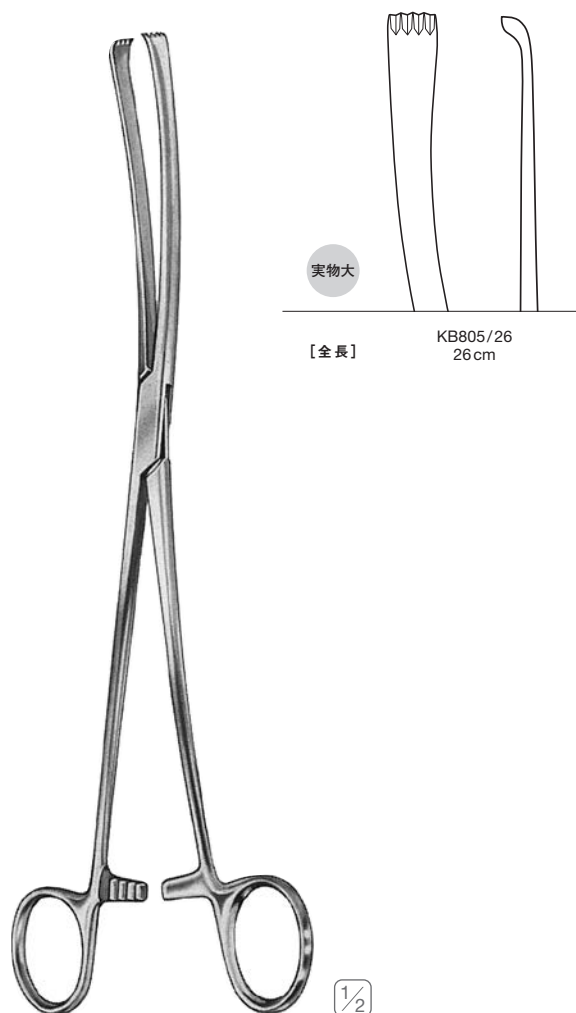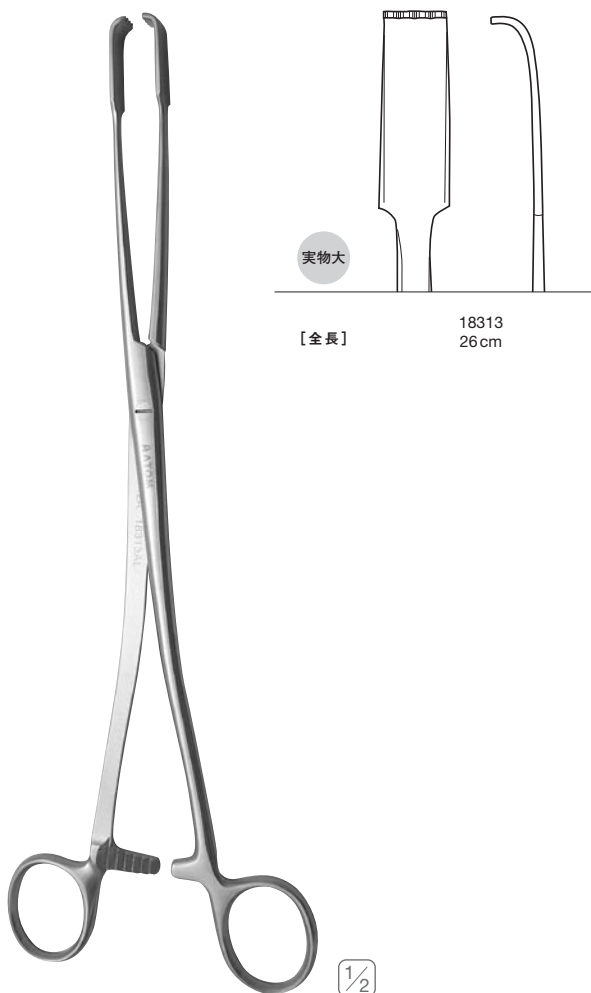

先端が平板波形になっており子宮口を把持し牽引するの用に用いられる腔部鉗子。


製品コード	先 幅	全 長
18313	9mm	26cm

ステンレス製

製品コード	識別番号	先 幅	全 長
19213	KB805/26	6.5mm	26cm

ステンレス製

ちつぷわんきよくかんし
KS腔部弯曲鉗子 5×6爪 BOX-LOCK
 KS Uterine Forceps with Curve

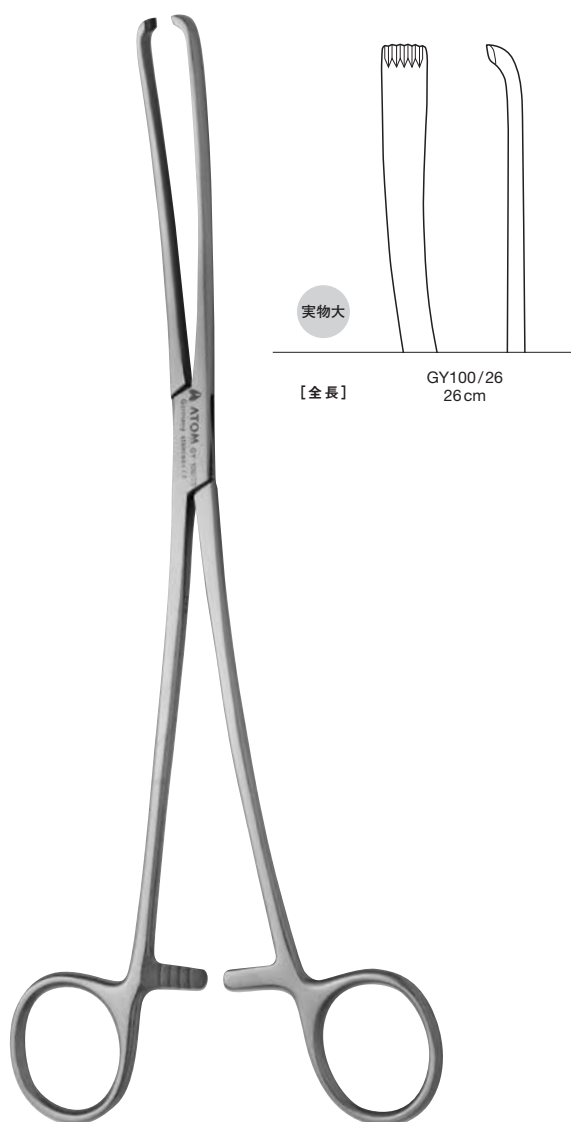

後腔円蓋を把持し無用な出血を防ぐ、
 閉経した患者に有用な腔部鉗子です。

組織の損傷を抑える把持部


- 組織の損傷を抑え無用な出血を防ぐため、刃の山と谷を細かく設計。

スリムな先端部

- 後腔円蓋の狭い部分にスムーズにアプローチできるようデザイン。

視野を確保する S 字カーブ

- 鉗子全体が緩やかな S 字状カーブを描き、処置中の視野確保を考慮。

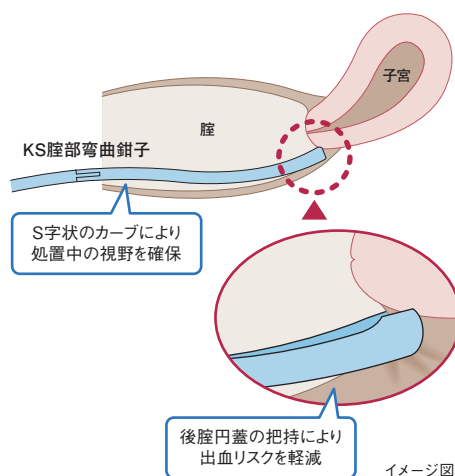

従来の子宮腔部鉗子とは異なり“子宮腔部”を把持・牽引するのではなく、“後腔円蓋”を把持・牽引するために開発された腔部鉗子。

製品コード	識別番号	先 幅	全 長
17850	GY100/26	6.5mm	26cm

ステンレス製

しきゅうちつぶかんし
子宮腔部鉗子

Portio Vaginalis Uteri Forceps

子宮頸部を固定し、把持や牽引を行うために用いられる鉗子。


たんこうかんし
IK単鉤鉗子 ネジ止／BOX-LOCK
IK Tenaculum Forceps, One Prong



17897



17896

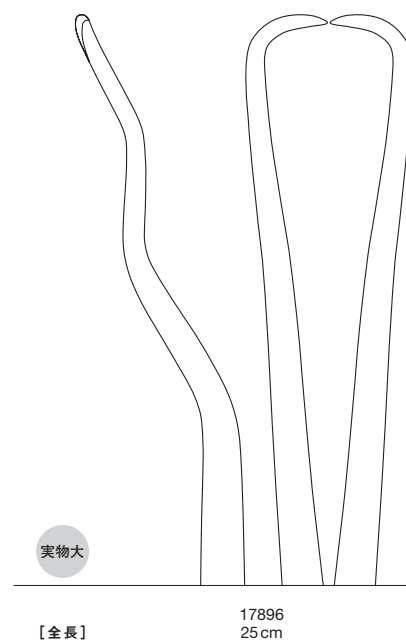


先端部をクランクさせることにより、腔部の視野を確保しやすくした鉗子。TLHで子宮マニピュレータートータルのコルポトミーカップを挿入する時などに有用です。

製品コード	関節部・規格	全 長
17897	ネジ止	25.7cm
17896	BOX-LOCK	25cm

ステンレス製

たんこうかんし
マルチン単鉤鉗子 ネジ止/BOX-LOCK
Martin Tenaculum Forceps, One Prong

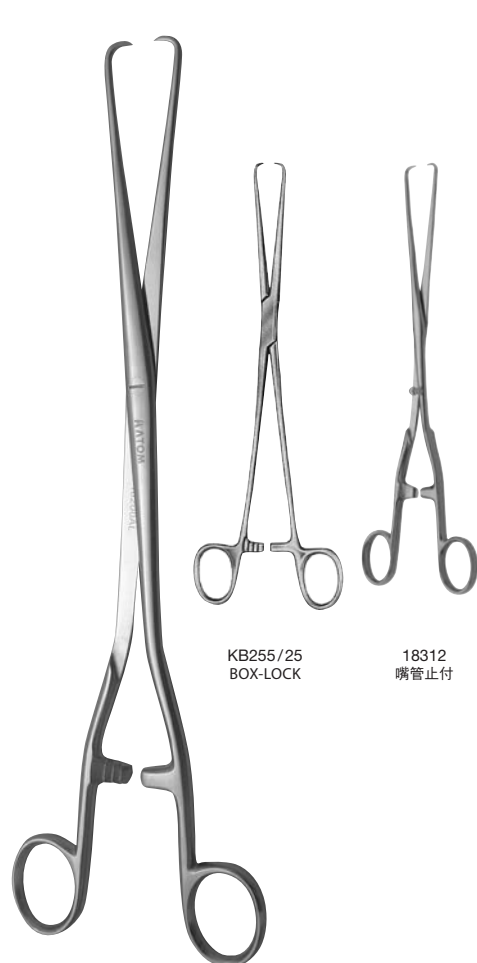


18200

先端に1組の鋭利な鉤を持ち、腔式手術で子宮頸部を、開腹手術で筋腫核を把持する際に用いられる腔部鉗子。

製品コード	識別番号	関節部・規格	全 長
18200	—	ネジ止	26cm
19207	KB255/25	BOX-LOCK	25cm
18312	—	嘴管止付・ネジ止	22.5cm

ステンレス製

そうこうかんし
ミューズ双鉤鉗子 ネジ止
Muzeu Tenaculum Forceps, Two Prongs

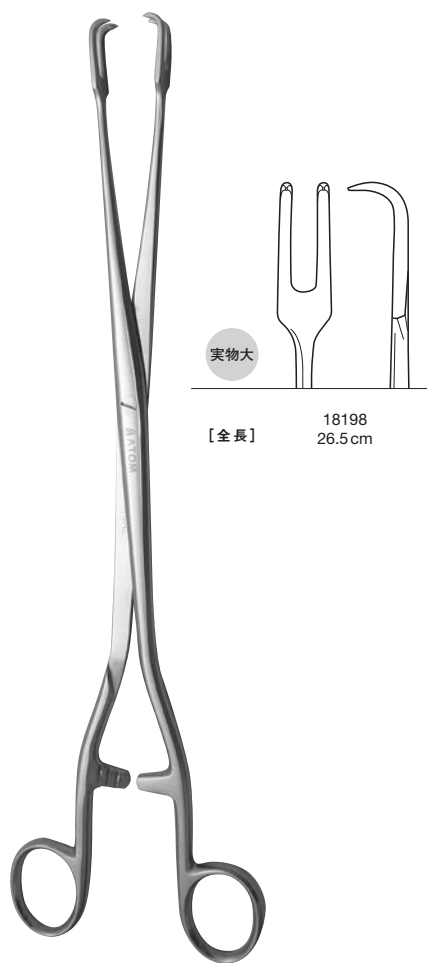

実物大

[全長]


18198
26.5cm

先端に2爪の鋭利な鉤をもち、使用目的はマルチン単鉤鉗子と同じ腔部鉗子。

製品コード	全 長
18198	26.5cm

ステンレス製

そうこうかんし
双鉤鉗子 BOX-LOCK
Tenaculum Forceps, Two Prongs

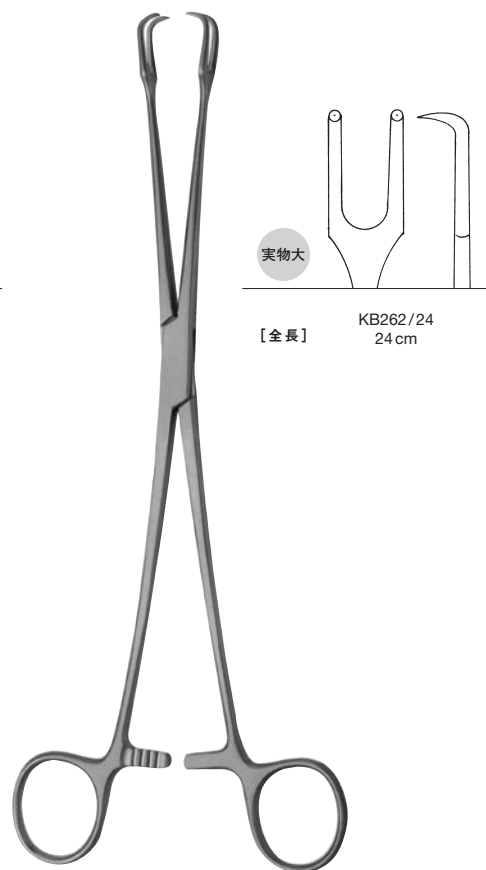

実物大

[全長]

KB262/24
24cm

ミューズ双鉤鉗子より刃幅が広く、より牽引しやすく設計された腔部鉗子。

製品コード	識別番号	全 長
19210	KB262/24	24cm

ステンレス製

しきゅうちつぶかんし
子宮腔部鉗子


Portio Vaginalis Uteri Forceps

子宮頸部を固定し、把持や牽引を行うために用いられる鉗子

しそこうかんし

四爪鉤鉗子 ネジ止

Tenaculum Forceps, Four Prongs

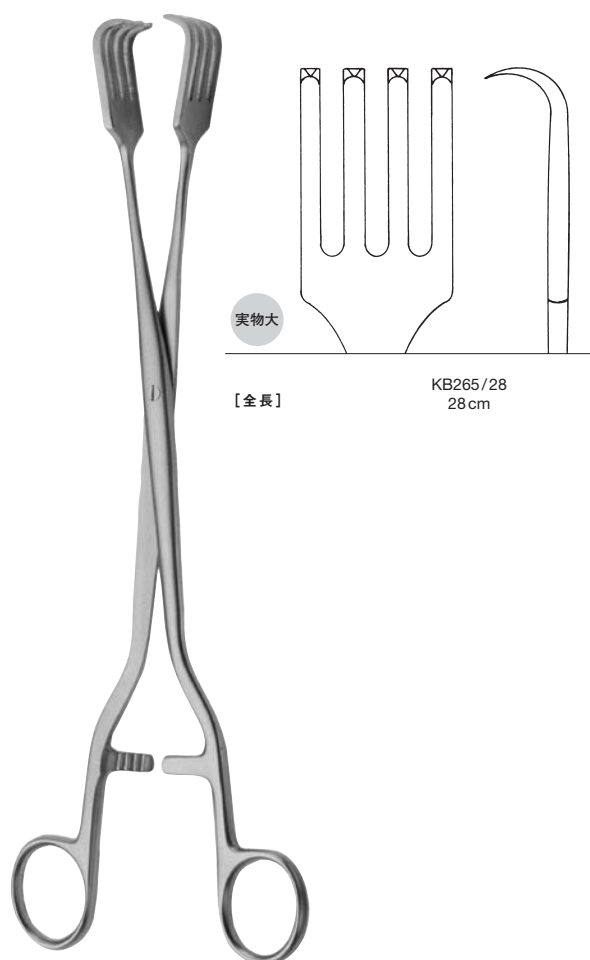


ミューズ双鉤鉗子と同目的で使用されるが、子宮筋腫、卵巣嚢腫等の剥出手術など、摘出物が大きい場合に用いられる腔部鉗子。

製品コード	識別番号	全 長
19212	KB265/28	28cm

ステンレス製

アトムリン式弯曲鉗子 ネジ止

Atom Lin-Type curved Forceps

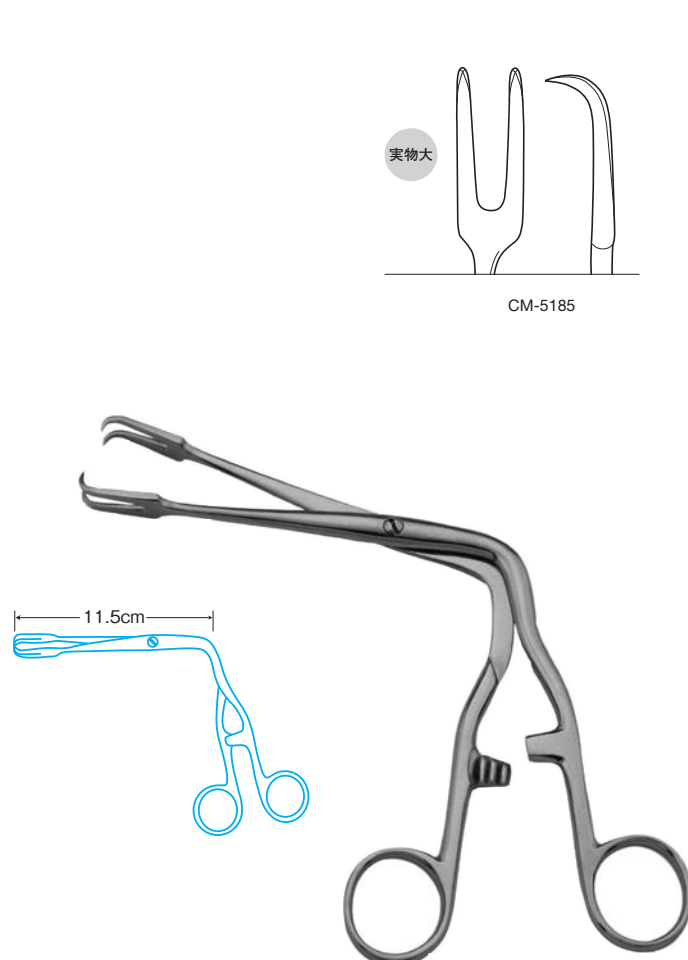

子宮鏡やレゼクトスコープ操作時に手が邪魔にならず、空間競合を起こしにくいように設計された腔部鉗子。

製品コード	識別番号	有効長
18340	CM-5185	11.5cm

ステンレス製

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮腔部鉗子

18313	塚原腔部鉗子	11B1X00002Y39069	塚原腔部鉗子	アトムメディカル株式会社
19213	腔部弯曲鉗子	11B1X00002Y39001	腔部弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社
17850	KS 腔部弯曲鉗子 5 × 6 爪 / 26cm	11B1X00002Y39003	KS 腔部弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社
17896	IK 単鉗鉗子 BOX-LOCK	11B1X00002Y39074	IK 単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
17897	IK 単鉗鉗子 ネジ止	11B1X00002Y39074	IK 単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19207	マルチン単鉗鉗子 BOX-LOCK	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18200	マルチン単鉗鉗子 ネジ止	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18312	マルチン単鉗鉗子 嘴管止付 / ネジ止	11B1X00002Y39023	マルチン単鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18198	ミューゾ双鉗鉗子	11B1X00002Y39072	ミューゾ双鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19210	双鉗鉗子	11B1X00002Y39035	双鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
19212	四爪鉗鉗子	11B1X00002Y39034	四爪鉗鉗子	アトムメディカル株式会社
18340	アトムリン式弯曲鉗子	11B1X00002Z39009	アトムリン式弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社

卵管検査用器械

18001	子宮卵管造影鉗子	11B1X00002Z74005	子宮卵管造影鉗子	アトムメディカル株式会社
18128	矢内原頸管カニューレ L	11B1X00002Z74002	矢内原頸管カニューレ	アトムメディカル株式会社
18129	矢内原頸管カニューレ S	11B1X00002Z74002	矢内原頸管カニューレ	アトムメディカル株式会社

造腔用プロテーゼ・腔ダイレーター

17022	造腔用プロテーゼ L	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17023	造腔用プロテーゼ M	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17024	造腔用プロテーゼ S	11B1X00002Z52004	造腔用プロテーゼ	アトムメディカル株式会社
17884	腔ダイレーター L	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社
17885	腔ダイレーター M	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社
17886	腔ダイレーター S	11B1X00002Z52005	腔ダイレーター	アトムメディカル株式会社

人工授精先・導尿カテーテル

17040	慶応式人工授精先 銀製 / 太・細 2 本組	11B1X00002Z74003	慶応式人工授精先	アトムメディカル株式会社
17035	S 字状カテーテル (導尿カテーテル)	11B1X00002Y51002	S 字状カテーテル	アトムメディカル株式会社