


子宮鏡・腹腔鏡用手術器具

Instruments for Hysteroscopy / Laparoscopy

子宮筋腫切除などで用いられる器具。

アトムリン式筋腫鉗子 BOX-LOCK Atom Lin-Type Tumor Forceps

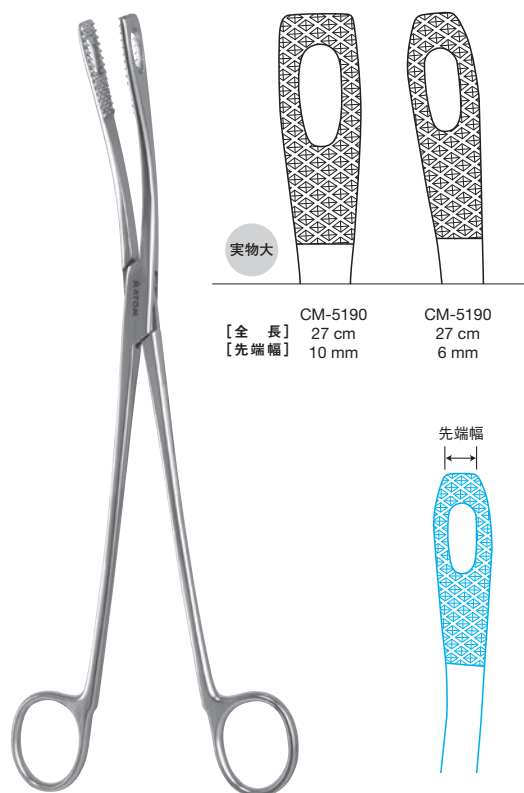


CM-5190
[全長] 27 cm
[先端幅] 10 mm

CM-5190
27 cm
6 mm


先端幅

アトムリン式弯曲鉗子 ネジ止 Atom Lin-Type Curved Forceps

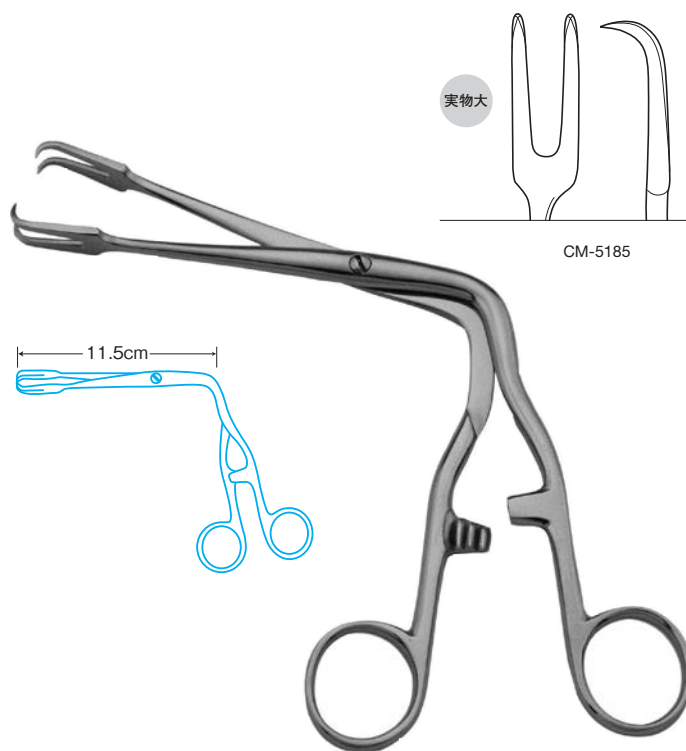

実物大

CM-5185

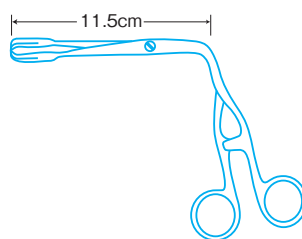

全体的に強度が高く、把持部には複数の隆起点があり、筋腫の発生方向を問わず把持しやすく設計された鉗子。レゼクトスコープと併用することで、残存筋腫の除去に有用。

製品コード	識別番号	先端幅	全長
18336	CM-5190	10mm	27cm
18337		6mm	

ステンレス製

子宮鏡やレゼクトスコープ操作時に手が邪魔にならず、空間競合を起こしにくいように設計された腔部鉗子。


製品コード	識別番号	有効長
18340	CM-5185	11.5cm

ステンレス製

子宮筋腫固定鉗子
Uterine Tumor Forceps



CM-5195

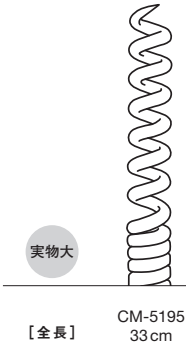

製品コード	識別番号	鉤 径	全 長
18044	CM-5195	5mm	33cm
18045	CM-5196	10mm	

CM-5195 鉤部・柄：ステンレス製 把手：黄銅製Crメッキ
CM-5196 鉤部：ステンレス製 柄・把手：黄銅製Crメッキ

トロッカーから差し込み、腹腔鏡手術で子宮筋腫を固定する筋腫固定器具。

腹腔鏡用手術器具

Instruments for Laparoscopy

子宮マニピュレーターTOTAL

ラテックスフリー

ディスプレイザブル

Uterine Manipulator Total



全腹腔鏡下子宮全摘術における、円滑な鏡視下操作をサポートします。


子宮腔長に合わせて先端チップの
長さを1cm短くできるスペーサー

子宮腔長の測定と、頸管拡張が
可能なスケール(太径)


腔管切断の目安と腔円蓋の挙上に
便利なコルポトミーカップ

腔管切除・縫合時の
気腹ガス漏れを防ぐ
閉塞バルーン



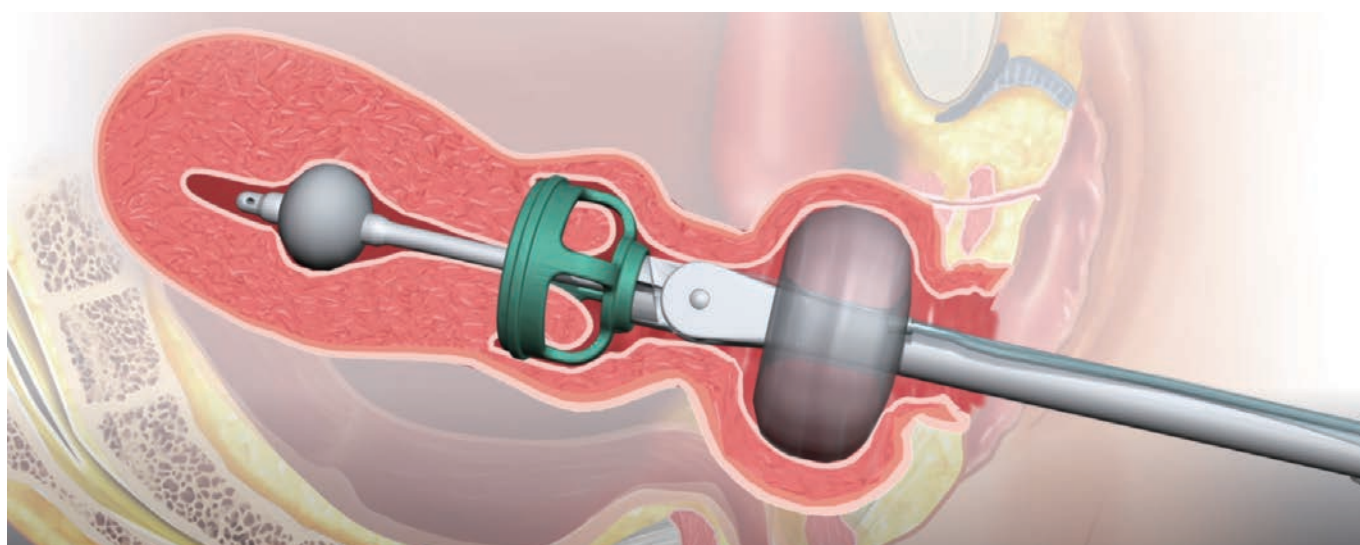

イメージ図

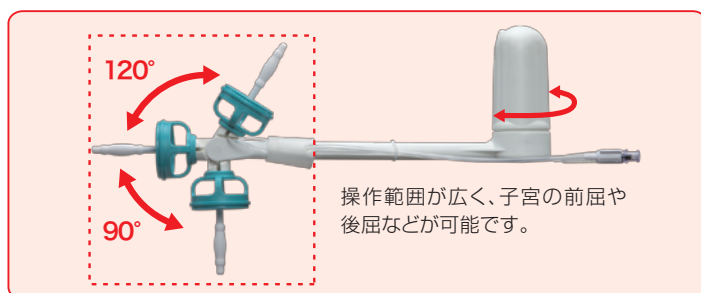

製品コード	チップ長	入 数
13410	7cm	5入
13411	9cm	5入

セット内容

コルポトミーカップ 3, 3.5, 4cm...各 1	ロック式シリンジ (60mL)	1
スペーサー.....1	スケール[太径].....	1
シリンジ (10mL).....1	閉塞バルーン.....	1

オプション

スケール

製品コード	仕 様	入 数
13414	細 径	50入



IK 単鉤鉗子

製品コード	関節部・規格	全 長
17897	ネジ止	25.7cm
17896	BOX-LOCK	25cm

腹腔鏡用手術器具

Instruments for Laparoscopy

子宮マニピュレーター

Uterine Manipulator

ラテックスフリー

ディスポーザブル






腹腔鏡下での子宮操作や卵管通色素検査に。

子宮の大きさに合わせて先端チップの長さを調節できるスペーサー

子宮腔長の測定と、頸管拡張が可能なスケール(太径)



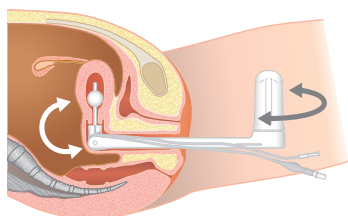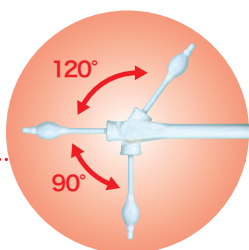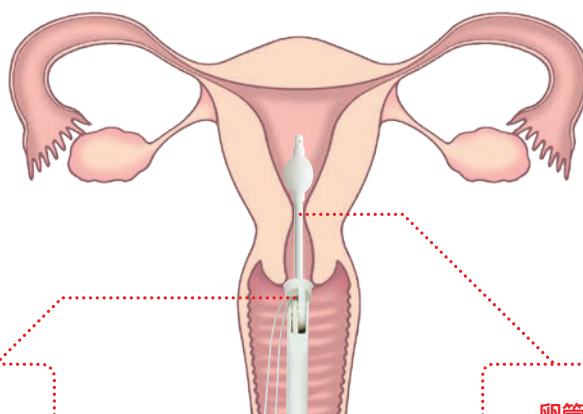


自由度の高い操作性

操作範囲が広く、子宮の前屈や後屈などが可能です。


卵管の疎通性検査が可能

先端から色素等を注入。

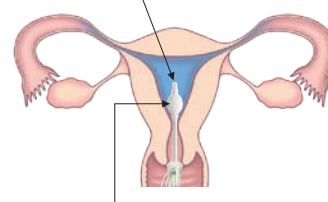

バルーンを膨張させることで注入した色素をもらしません。

チップの実効長の調整が可能

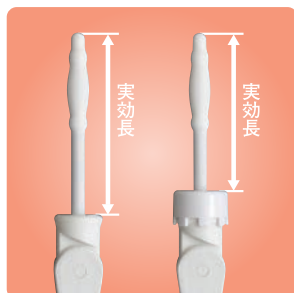

子宮の大きさに合わせてスペーサーを装着し、実効長を調整することができます。



製品コード	チップ長	入 数
13404	7cm	5入
13405	9cm	

セット内容

スケール〔太径〕……………・1
 スペーサー……………・1
 シリンジ(10mL)……………・1

オプション

スケール

製品コード	仕 様	入 数
13414	細 径	50入

製品コード	品名	届出番号	販売名	製造販売元
-------	----	------	-----	-------

子宮鏡・腹腔鏡手術器具

18336	アトムリン式筋腫鉗子 先幅 10mm	11B1X00002Z39023	アトムリン式筋腫鉗子	アトムメディカル株式会社
18337	アトムリン式筋腫鉗子 先幅 6mm	11B1X00002Z39023	アトムリン式筋腫鉗子	アトムメディカル株式会社
18340	アトムリン式弯曲鉗子	11B1X00002Z39009	アトムリン式弯曲鉗子	アトムメディカル株式会社
18044	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 5mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社
18045	子宮筋腫固定鉗子 鉤径 10mm	11B1X00002Z42002	子宮筋腫固定鉗子	アトムメディカル株式会社

腹腔鏡用手術器具

13410	子宮マニピュレーター トータル 7cm チップ /5 入	226ADBZX00043000	子宮マニピュレーター トータル	アトムメディカル株式会社
13411	子宮マニピュレーター トータル 9cm チップ /5 入	226ADBZX00043000	子宮マニピュレーター トータル	アトムメディカル株式会社
13404	子宮マニピュレーター 7cm チップ	21700BZY00137000	子宮マニピュレーター	アトムメディカル株式会社
13405	子宮マニピュレーター 9cm チップ	21700BZY00137000	子宮マニピュレーター	アトムメディカル株式会社
13414	スケール 細径			アトムメディカル株式会社