



子宮鏡・腹腔鏡用手術器具

Instruments for Hysteroscopy / Laparoscopy

アトムリン式筋腫鉗子 BOX-LOCK Atom Lin-Type Tumor Forceps

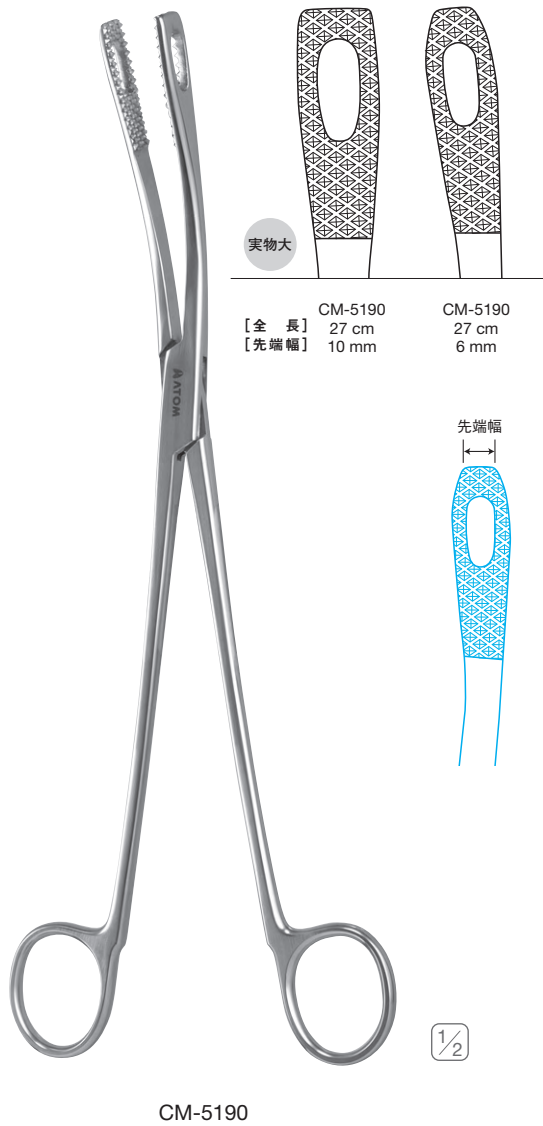

アトムリン式弯曲鉗子 ネジ止 Atom Lin-Type Curved Forceps

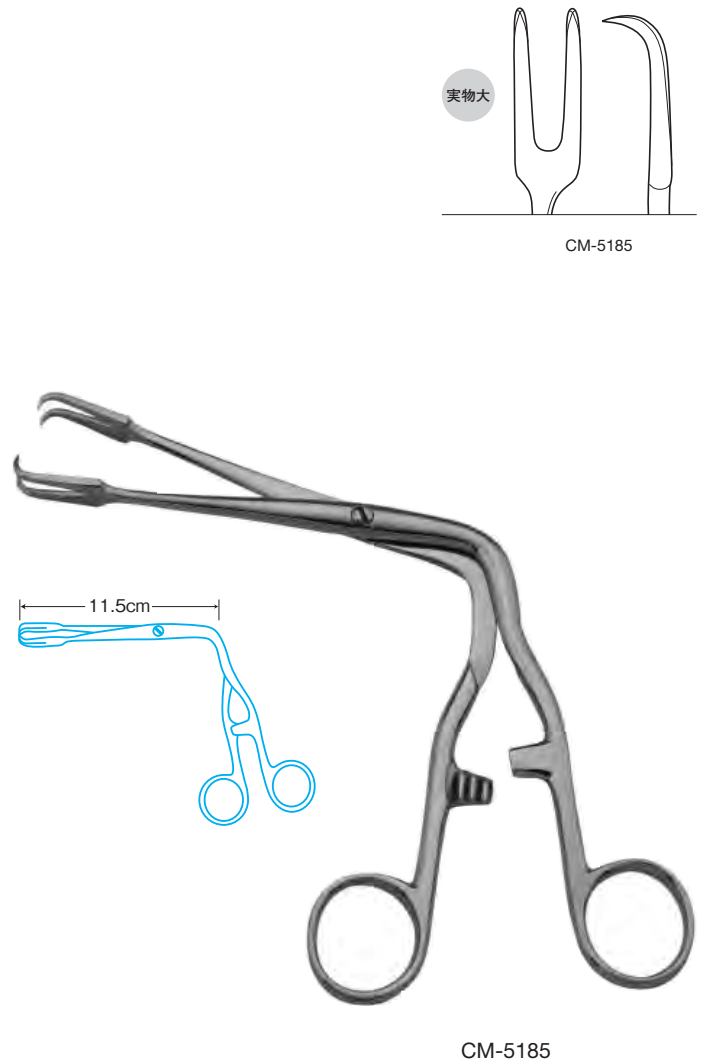

製品コード	カタログ番号	先端幅	全長
18336	CM-5190	10mm	27cm
18337		6mm	

ステンレス製


- レゼクトスコープと併用することで残存筋腫の除去に有用です。
- 鉗子の強度を全体的に高めてあり、把持部には隆起点が複数あるので、筋腫の発生方向を問わず把持しやすい構造です。

製品コード	カタログ番号	有効長
18340	CM-5185	11.5cm

ステンレス製

- 鉗子の中央部が弯曲しているので、子宮鏡やレゼクトスコープなどの操作時に鉗子を持つ手が邪魔にならず、空間競合を起こしにくくなります。

子宮筋腫固定鉗子 Uterine Tumor Forceps

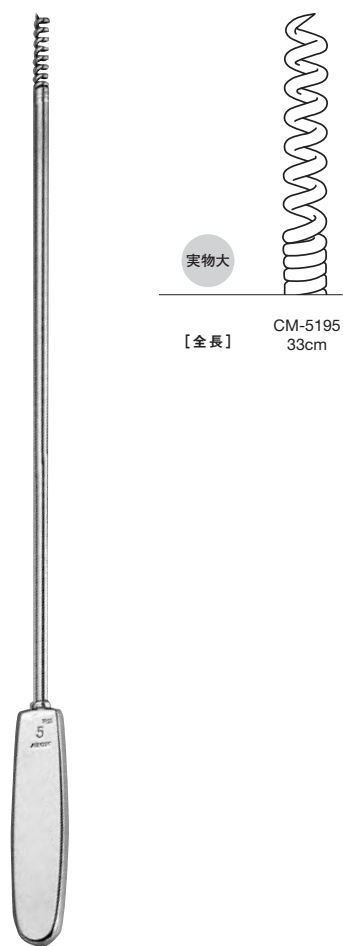

CM-5195

製品コード	カタログ番号	鉤 径	全 長
18044	CM-5195	5mm	33cm
18045	CM-5196	10mm	

CM-5195 鉤部・柄:ステンレス製 把手:黄銅製Crメッキ
CM-5196 鉤部:ステンレス製 柄・把手:黄銅製Crメッキ

- 子宮筋腫を固定し、切開や子宮からの分離を容易にすることができます。
- 腹腔鏡手術の際に使用します。

腹腔鏡用手術器具

Instruments for Laparoscopy

子宮マニピュレータートータル

ラテックスフリー

ディスプレイザブル

Uterine Manipulator Total





全腹腔鏡下子宮全摘術における、円滑な鏡視下操作をサポートします。

子宮の大きさに合わせて先端チップの長さを調節できるスペーサー

子宮腔長の測定と、頸管拡張が可能なスケール

腔管切断の目安と腔円蓋の挙上に便利なコルポミーカップ

腔管切除・縫合時の気腹ガス漏れを防ぐ閉塞バルーン

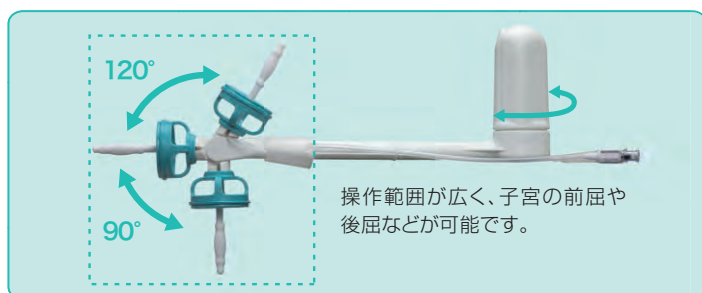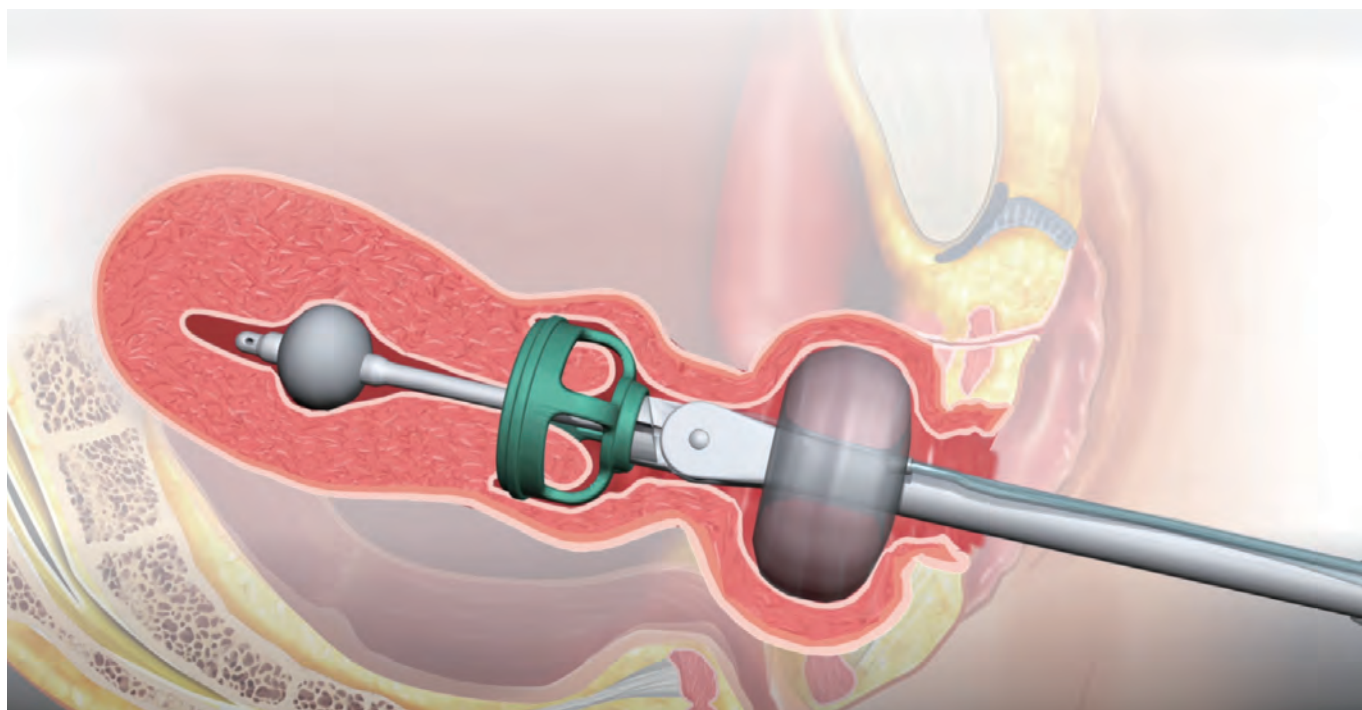

製品コード	チップ長	発売単位
13412	7cm	スケール細径1個付 / 1個
13410	7cm	1箱(5個入)
13413	9cm	スケール細径1個付 / 1個
13411	9cm	1箱(5個入)

セット内容

コルポトミーカップ 3, 3.5, 4cm...各 1
 スペーサー.....1
 シリンジ(12mL).....1
 シリンジ(60mL).....1
 スケール[太径].....1

オプション

スケール

製品コード	仕様	入数
13414	細径	1箱(50本)




IK 単鉤鉗子

製品コード	関節部・規格	全長
17897	ネジ止	25.7cm
17896	BOX-LOCK	25cm

腹腔鏡用手術器具

Instruments for Laparoscopy

子宮マニピュレーター ラテックスフリー ディスポーザブル
Uterine Manipulator



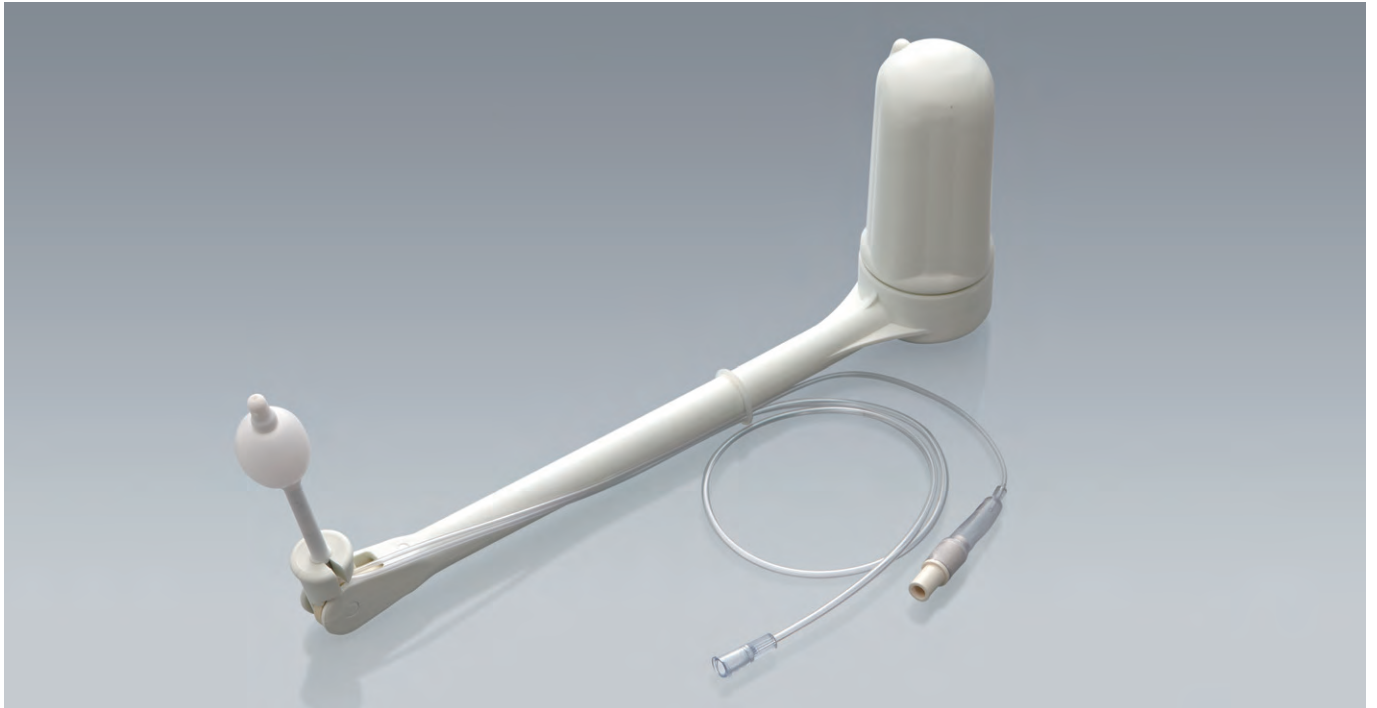


腹腔鏡下での子宮操作や卵管通色素検査に。

子宮の大きさに合わせて先端チップの長さを調節できるスペーサー

子宮腔長の測定と、頸管拡張が可能なスケール



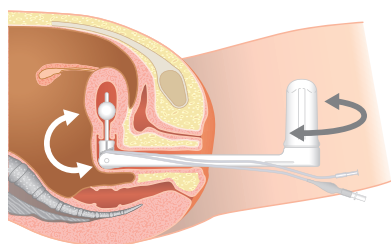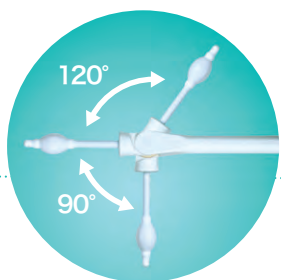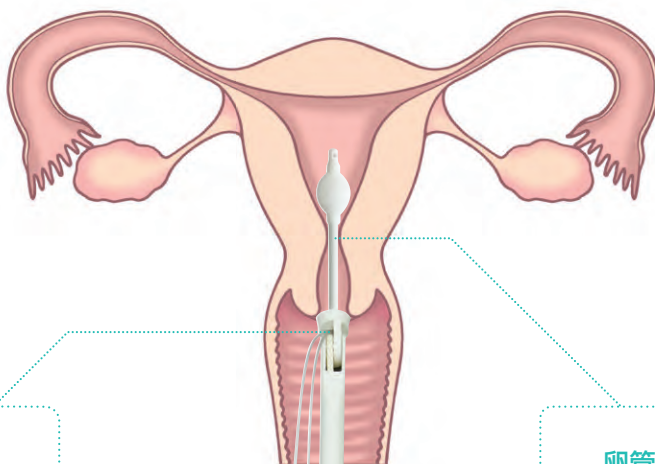


自由度の高い操作性

操作範囲が広く、子宮の前屈や後屈などが可能です。


卵管の疎通性検査が可能

先端から色素等を注入。

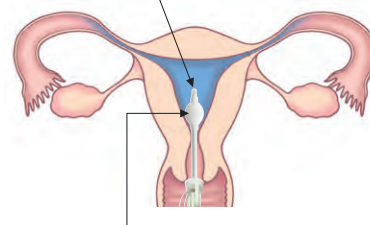

バルーンを膨張させることで注入した色素をもらしません。

チップの実効長の調整が可能

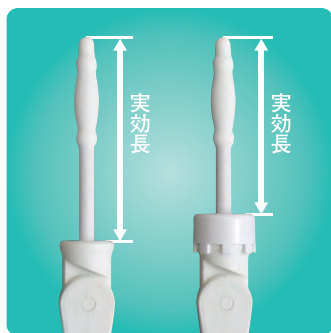

子宮の大きさに合わせてスペーサーを装着し、実効長を短くすることができます。

製品コード	チップ長	発売単位
13404	7cm	1箱(5個入)
13405	9cm	

セット内容

スケール〔太径〕……………1
 スペーサー……………1
 シリンジ……………1

オプション

スケール

製品コード	仕様	入数
13414	細径	1箱(50本)